

Beauty creator for human beings!

**HIRONIC**

## ***Buen precio con un rápido retorno de la inversión***

### *Rejuvenecimiento y tensado de la piel sin cirugía*

- Rejuvenecimiento y tensado de la piel
- Tensado facial no invasivo
- Elevación de las cejas
- Tensado de las mejillas
- Reducción del pliegue nasolabial
- Reducción del doble mentón



NEW

# dōublo-s

Sistema HIFU de segunda generación



**Económico!  
Doble Beneficio!  
Doble Seguridad!**


Doublo-s es un sistema HIFU de segunda generación, destinado al tensado y reafirmación de la piel.

# HIFU (Ultrasonido focalizado de alta intensidad) entrega fraccional en la profundidad seleccionada


## HIFU Historia

HIFU (Ultrasonido focalizado de alta intensidad) es un procedimiento médico de alta precisión que utiliza ultrasonido focalizado de alta intensidad para calentar y destruir tejido patógeno rápidamente. El primer uso generalizado de HIFU fue como tratamiento para el cáncer de próstata.

## Evolución tecnológica de los láseres

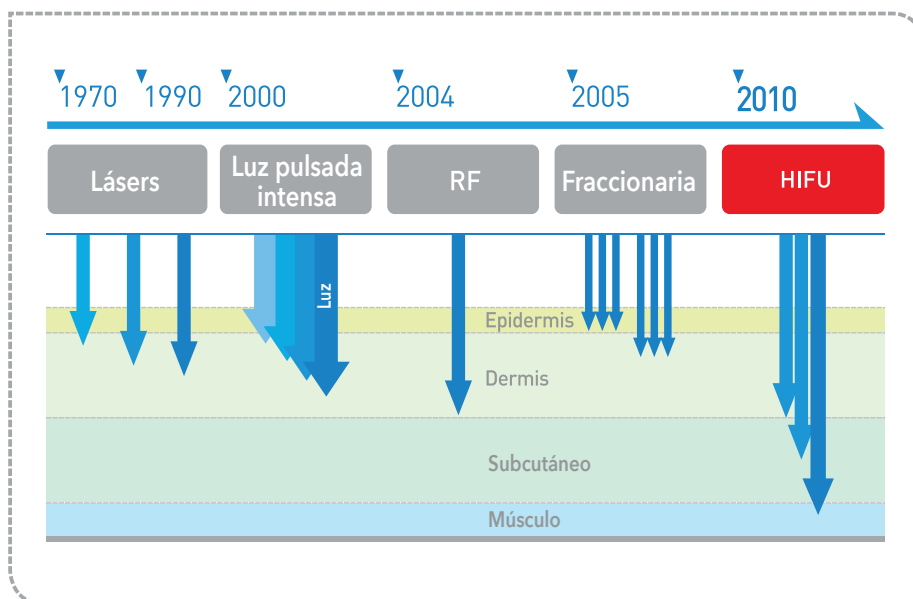

## HIFU Principle

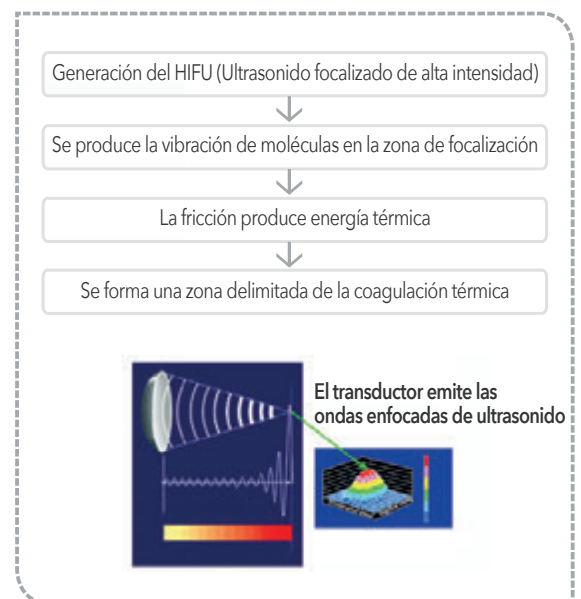

# 1 Costo económico

Doublo-s se ha simplificado mediante la eliminación de la imagen ultrasónica de la popularización de HIFU de Doublo con un precio accesible.

# 2 doublo vs doublo-s

Los clips de vídeo y las imágenes promocionales se pueden mostrar durante el tratamiento

Leyenda	doublo	doublo-S
Sistema	Sistema de control HIFU Sistema de imagen ultrasónica	Sistema de control HIFU
Sonda de imagen	128 CH	Ninguno
Posicionamiento	Modelo Premium	Económico

## Aplicaciones


- Proceso de rejuvenecimiento y tensado de la piel
- Lifting no-invasivo para la cara
- Lifting de cejas

# 3 Efecto doble

## Contribuye a

→ Remodelación del colágeno y a la contracción del SMAS en un solo tratamiento

# Sistema HIFU de segunda generación

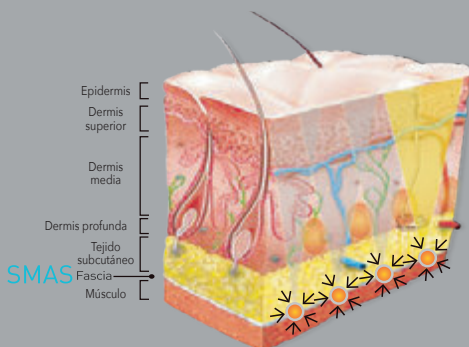

## Mecanismo

HIFU (Ultrasonido focalizado de alta intensidad)

Genera coagulación térmica en el **SMAS** (Sistema Músculo Aponeurótico Superficial), **fascia**, **dermis profunda** y tejido **subcutáneo**

Se activa el proceso de rejuvenecimiento y tensado de la piel





## Consumible


4

Seleccione los cartuchos transductores optimizados para diferentes áreas de tratamiento.

	M7	D4	D7 (Opcional)
Frecuencia	7.0 MHz	4.0 MHz	7.0 MHz
Tratamiento	3.0 mm	4.5 mm	4.5 mm

## Qué y por qué?


5

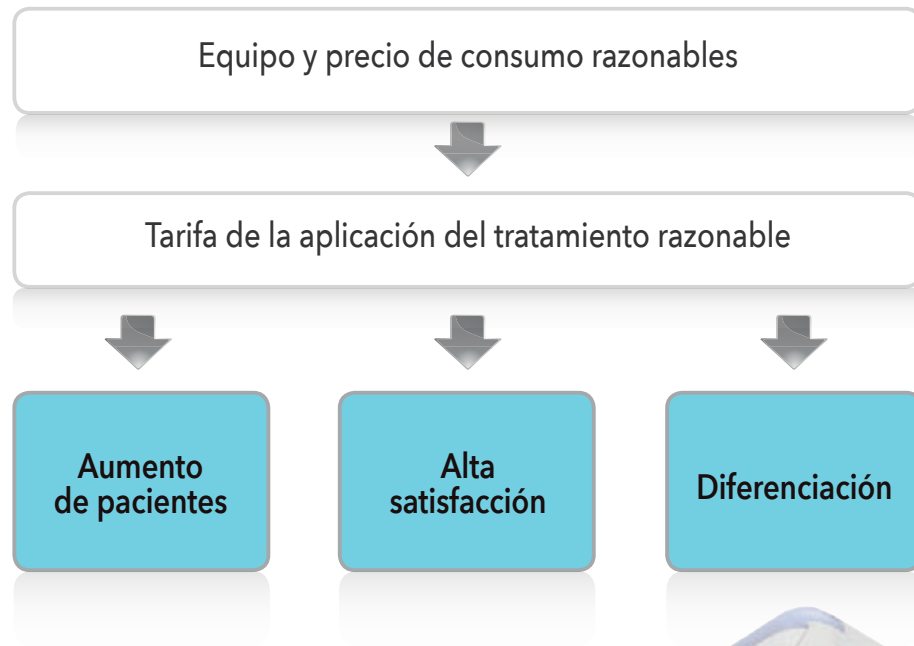

### Sistema HIFU de segunda generación



#### Tratamiento de doble capa

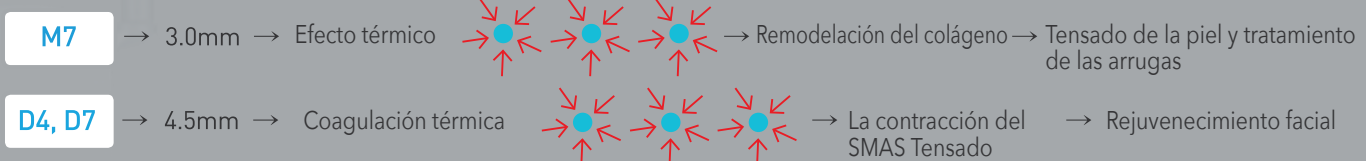



# Resultado del Tratamiento



# Especificación

Energía	HIFU
Fluencia	0.2 ~ 2J/cm <sup>2</sup> (0.05 Step)
Monitor	Pantalla LCD
Cartucho transductor	M7 7.0MHz, 3.0mm D4 4.0MHz, 4.5mm D7 7.0MHz, 4.5mm
Espaciado	0.5-10mm
Longitud	5.0-25mm (1.0 Step)
Requisitos eléctricos	AC 100-240V, 50/60Hz
Dimensiones	400 X 455 X 460 ( W X D X H) (Sin carro)
Peso	15kg (Sin carro)



## Sobre Hronic

Hironic Co., Ltd. es un fabricante de dispositivos estéticos médicos, que incluye el nuevo MIDAS® ICE RF & IR para el contornocorporal y el estiramiento de la piel; Láser fraccional de CO2 MIXEL®; MIPL IPL de segunda generación con pieza de mano especializada para la depilación por enfriamiento por contacto ; Láser de diodo MIDEPIO 808 nm para depilación y HIFU de 2ª generación para lifting facial y endurecimiento de la piel. Ha estado proporcionando sistemas rentables y de alto rendimiento en más de 30 países de todo el mundo.



**TECNOIMAGEN**

www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273

**HIRONIC**



Hironic has archived ISO 9001 and ISO 13485 by SGS and GMP in Korea. Its products have been approved by SGS in terms of CE MDD.