

enerjet 2.0  
JVR POWERED

**SINERGIA**

ENTRE ENERGIA Y SOLUCIONES



**NUEVO**

Enerjet 2.0 es adecuado para todo tipo de piel, tratamientos durante todo el año, y se implementa fácilmente en la clínica del médico.

Esta nueva modalidad no-térmica clínicamente probada para la medicina estética permite un tratamiento rápido, seguro y eficaz para el tensado cinético no quirúrgico de la piel, el engrosamiento dérmico y la reducción de arrugas para la cara, cuello y escote, cicatrices de acné, queloides y cicatrices hipertróficas, cicatrices de cesárea, estrías y más.

### Enerjet 2.0 ofrece ventajas incomparables tanto para médicos como para pacientes, incluyendo:

- Generación de un perfil único de micro trauma.
- Propagación óptima del compuesto.
- Efecto estructural visible y duradero.

El **nuevo aplicador** incorpora un sistema de dosificación mejorado que proporciona un volumen preciso del compuesto independientemente de su viscosidad. Es más ligero para una aplicación más fácil y el **nuevo diseño horizontal** permite una mejor experiencia para el usuario.

Una **interfaz para el usuario intuitiva** que facilita un protocolo de aplicación óptimo y un **sistema de licencias flexible** mejora la posibilidad de alcanzarlo. El **funcionamiento rápido** (menos de 3 segundos entre disparos) y el **menor ruido del aplicador** (casi silencioso) hacen del tratamiento con Enerjet 2.0 una **experiencia extremadamente cómoda** para el paciente.

#### Líneas del cuello

Antes y 1 semana después de 2 sesiones



Cortesía del Dr. Arad, Israel

#### Cicatrices de acné

Antes y 1 mes después de 3 sesiones



Cortesía del Dr. Arad, Israel

#### Estrías


Antes y 8 meses después de 1 sesión



Cortesía del Dr. Arad, Israel

#### Engrosamiento dérmico- Escote

Antes y 3 meses después de 2 sesión

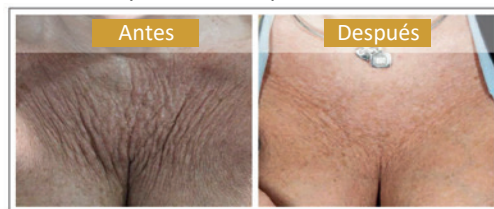

Cortesía del Dr. Patel, Inglaterra

“

*“Es el tratamiento más eficaz para las estrías. Es también la primera línea de tratamiento para las cicatrices profundas del acné que no mostrarían tal mejora con cualquier otro tipo de tecnología”*

**Prof. Daniel Cassuto, M.D., Cirujano Plástico,**  
Milan, Italia

*“Enerjet es un tratamiento innovador y sorprendente que ofrecemos en la Clínica de PHI. Es un tratamiento que recomendamos para las lesiones en la piel típicamente difíciles de tratar; Enerjet es una terapia segura y no invasiva, que permite obtener resultados a largo plazo y duraderos.”*

**Dr. Tapan Patel, MBBS, MRCP. Director Médico, PHI Clinic,**  
Londres, Inglaterra

*“Enerjet llena la brecha terapéutica para las enfermedades de la piel más difíciles como cicatrices de acné y estrías donde muchas de las opciones de tratamiento existentes fallan. Gracias al tiempo de reposo mínimo, así como la falta de dolor y sus posibilidades de operación independientemente de la exposición al sol, hace de Enerjet una opción de tratamiento muy apreciada tanto por los pacientes como por los médicos.”*

**Dr. Sabine Zenker, Dermatóloga,**  
Munich, Alemania

*“La nueva aplicación de Enerjet es el lifting facial "llego y me voy" o como lo llamo el "lifting sin cuchillo". Es adecuado para aquellas mujeres que buscan una mejora inmediata sin ningún tiempo de reposo post-tratamiento.”*

**Dr. Alex Levenberg, Cirujano Plástico**  
Tel Aviv, Israel

”




# ENERJET - 2.0 JVR POWERED


Los especialistas tenían hasta ahora dos opciones para mejorar la apariencia de la piel afectada por cicatrices y arrugas: dispositivos basados en energía por un lado y compuestos inyectables por el otro. **EnerJet** fue diseñado para tomar lo mejor de ambos enfoques y mejorar los resultados finales.

## Jet Volumetric Remodeling™ UVR)

Enerjet2.0 utiliza la tecnología de Jet Volumetric Remodeling™ (JVR), propia y **patentada** de Perfection para proporcionar simultáneamente energía cinética y un compuesto activo con un **daño epidérmico mínimo**, para una remodelación dérmica profunda.

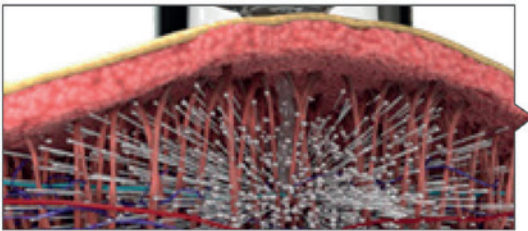

Una potente inyección de compuestos se introducen en las capas más profundas de la piel mediante energía cinética, dando un efecto volumétrico con una óptima propagación del material. La corriente del chorro dispersa lateralmente el agente potenciador de la piel, cubriendo 100 veces el área del punto de entrada de una aguja 32G.

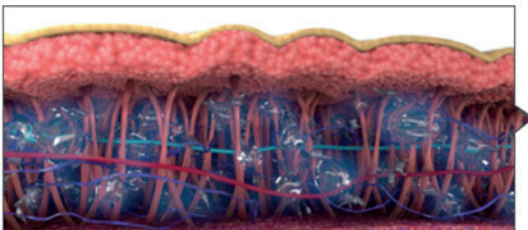

La sinergia entre dos efectos pone en marcha un proceso de cicatrización en cascada, dando como resultado un proceso natural de cicatrización e hidratación que genera producción de nuevo colágeno, generando en última instancia engrosamiento y tensado de la piel.





Los pacientes ven y sienten una mejora inmediata en su piel que continúa e incluso mejora durante un año y más. El análisis clínico muestra dos o tres veces el engrosamiento dérmico después de 3 tratamientos.

Los tratamientos son aplicables incluso para las zonas más delicadas, como las que rodean los labios, la frente, las mejillas, el cuello, el escote y las manos.



Esta tecnología segura y no invasiva adquiere inmediatamente un aspecto más suave, bien hidratado y más joven, con beneficios estructurales a largo plazo. También ofrece **soluciones clínicamente probadas** a las indicaciones que no tienen una solución satisfactoria, como cicatrices de acné, queloides, estrías y líneas del cuello.

## Evidencia histológica

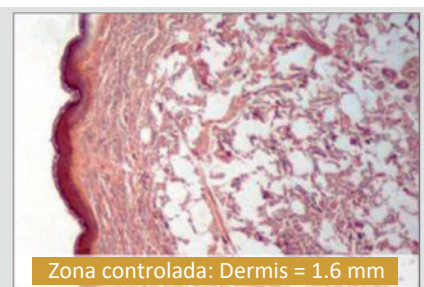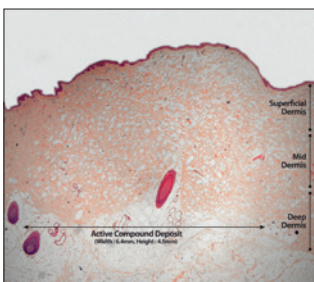

"Material dentro de la dermis. La epidermis permanece intacta"

Dr. Emmanuel Loeb, Patólogo

Sabine Zenker MD, Biaction Technology, un nuevo sistema de entrega de HA para la remodelación de la piel; Actualización clínica, 2011.



# Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Entrada de corriente	100-240VAC, 50/60Hz, 350W
Modo de operación	Jet neumático
Peso	Menos de 30kg.
Sistema de aplicación	1 kg
Dimensiones (alto, ancho y prof.)	1.15m x 40cm x 40cm
Diámetro del Jet	0.02 mm
Tasa de disparos	Más de 28 disparos por minuto

Distribuidor

**TECNOIMAGEN**

[www.tecnoimagen.com.ar](http://www.tecnoimagen.com.ar) | 0810 333 8273

## Sobre Perfection

La Compañía había desarrollado el Enerjet, la primera combinación mundial de energía cinética y un compuesto activo para una remodelación dérmica profunda e inmediata y para efectos estéticos duraderos. Hoy, la empresa se enorgullece de ofrecer el sistema transdérmico más avanzado de la industria - El Enerjet 2.0



Tel: +972 (0) 8.936.3004 | Fax: +972. (0) 77.5042006 | [info@perf-action.com](mailto:info@perf-action.com) | [www.enerjet-med.com](http://www.enerjet-med.com)  
CE 0344 | EN ISO 13485 ©2016, PerfAction.

